

# DuraShock Produktvalsguide

Artikelnummer som anges nedan representerar en komplett produkt med manometer, en FlexiPort-manschett storlek 11 och en väska.

Manometrar med tryckventil  
60-serien

Manometrar med skruvventil  
50-serien

Integrerade manometrar  
40-serien

LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI • 150 CM STÖTSÄKERHET • LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI • 150 CM STÖTSÄKERHET

Platinalinjen



DS58 Tycos®  
Klassisk manometer  
#DS58-11



DS48A Tycos®  
Klassisk integrerad  
manometer  
#DS48A-11

15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET

Guldlinjen



DS66 Manometer med  
tryckventil  
#DS-6601-189



DS56 Manometer  
#DS-5601-189

10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET

Silverlinjen



DS65 Manometer med  
tryckventil  
#DS-6501-189



DS55 Manometer  
#DS-5501-189



DS45 Integrerad  
manometer  
#DS45-11

5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET • 5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI • 76 CM STÖTSÄKERHET


Bronslinjen



DS54 Manometer  
#DS-5401-189



DS44 Integrerad  
manometer  
#DS44-11

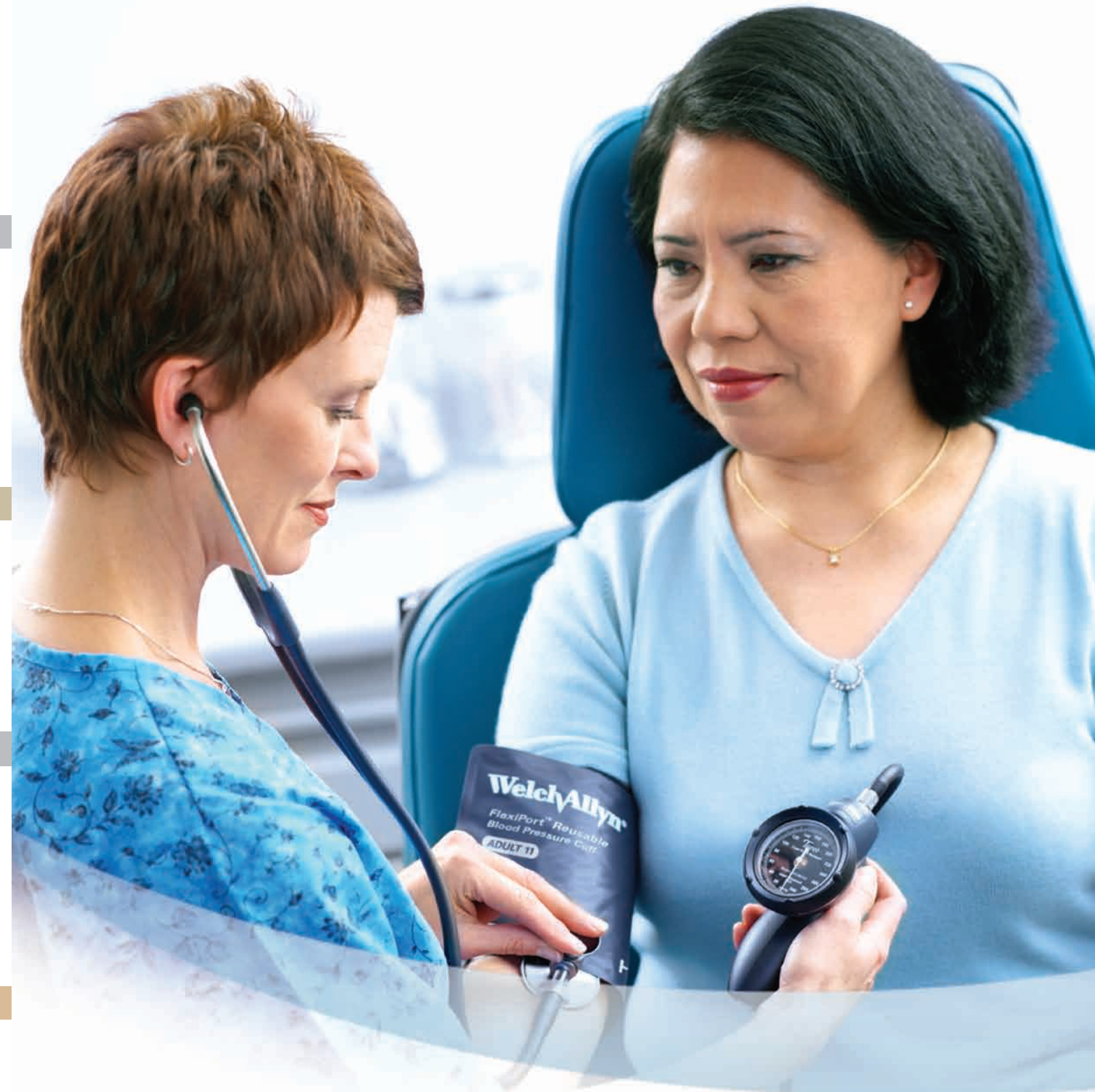

Welch Allyn blodtrycksprodukter  
med stötsäker DuraShock™-teknik

För ytterligare information om hur blodtrycksprodukter med DuraShock-teknologi kan hjälpa dig, kontakta din försäljare eller gå in på [www.welchallyn.com/durashock](http://www.welchallyn.com/durashock).

**WelchAllyn®**  
Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Europeisk kundservice  
Navan Business Park, Dublin Road  
Navan, County Meath, Irland  
Tel: +353 46 906 7790  
Fax: +353 46 906 7754

Frankrike: +33 155 69 58 49  
Tyskland: +49 6950 985 132  
Nederländerna: +31 202 061 360

Sydafrika: +27 11 777 7555  
Sverige: +46 858 536 551  
Storbritannien: +44 207 365 6780

**WelchAllyn®**  
Advancing Frontline Care™



# Bibehåll exakta blodtrycksmätningar med lägre livstidskostnad med Welch Allyn DuraShock™-teknik

I stressade sjukvårdsmiljöer där utrustningen måste vara tålig och tillförlitlig, håller Welch Allyn's aneroida sfygmomanometrar med stötsäker DuraShock™-teknik blodtrycksmätarna säkert exakta och kalibrerade under längre tid, jämfört med traditionella aneroida sfygmomanometrar.



## Kugghjulsfri

Welch Allyn DuraShock™ blodtrycksmätare med revolutionerande kugghjulsfri teknik – den första större innovationen inom aneroid teknologi på nästan 100 år.



## Färre delar

Den kugghjulsfria designen ger DuraShock-mätare färre fjädrar, detaljer och delar – och en tåligare, robustare design – än traditionella blodtrycksmätare.



## Exakt och tillförlitlig

Den tåliga, kugghjulsfria designen inuti mätaren gör DuraShock blodtrycksmätare stötsäker och bättre rustad att stå emot daglig användning och brysk hantering. De förblir kalibrerade under längre tid, vilket garanterar exakta tillförlitliga avläsningar under mätarens livslängd.



## Lägre livstidskostnad

Enastående stötsäkerhets- och kalibreringsgarantier innebär att du inte behöver byta ut eller omkalibrera Welch Allyn-mätare lika ofta som konkurrerande utrustning, vilket undviker problem med utrustningen och sänker totalkostnaden.



*”I en utvärderingsstudie av mekaniska stötar, visade sig den nya kugghjulsfria teknologin vara mer exakt och tillförlitlig än traditionella aneroidenheter. Detta är speciellt viktigt eftersom den kliniska användaren oftast inte märker av vanliga kalibreringsfel som uppkommer till följd av stötar.”*

—Resultat från fallteststudie av aneroid, Dr. Klaus Forstner

Resultat från "Fallstudie av aneroid: Utvärdering av en ny kugghjulsfri aneroid blodtrycks-teknik och klinisk relevans för stötsäkerhet", utförd av Dr. Klaus Forstner, 2004.



Prisbelönt teknik

Patenterad DuraShock-teknik är den första större uppfinningen inom aneroid sfygmomanometerteknik på nästan 100 år.

## Fyra produktlinjer med DuraShock-teknik:



### Platinalinjen

LIVSTIDS KALIBRERINGSGARANTI

- Extra stötsäker—kan stå emot upp till 150 cm fall och förblir exakt
- Livstids kalibreringsgaranti
- Exklusivt utförande
- Juvelförsedd friktionspunkt för lång livslängd
- Lasergraverad skala för precision
- Högklassigt uppumpningssystem för komfort



### Guldlinjen

15 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

- Stötsäker vid 76 cm fall för precision och lägre totalkostnad
- 15 års kalibreringsgaranti
- Exklusivt utförande
- Juvelförsedd friktionspunkt för lång livslängd
- Lasergraverad skala för precision



### Silverlinjen

10 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

- Stötsäker vid 76 cm fall för precision och lägre totalkostnad
- 10 års kalibreringsgaranti
- Lasergraverad skala för precision



### Bronslinjen

5 ÅRS KALIBRERINGSGARANTI

- Stötsäker vid 76 cm fall för precision och lägre totalkostnad
- 5 års kalibreringsgaranti